


	BUÜ-HASTANESİ BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ İÇİN NUMUNE ALINMASI	Doküman Kodu	EY.FR.70.209.01
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2025
		Revizyon Tarihi	--
		Revizyon No	00
		Sayfa	1/1

1. Kapak çevrilerek açılır
2. Çubuk çıkarılır
3. Çubuğun ucundaki vida gibi çıkıntılı kısım dışkıya batırılır. Eğer dışkı çok katı ise 4-5 defa dışkıya batırılır
4. Çubuk çıkarıldığı yere geri yerleştirilir ve kapağı çevrilerek sıkıca kapatılır
5. Mavi sıvı ile dolu kap iyice çalkalanır
6. Buzdolabının kapağında muhafaza edilir
7. En geç 5 gün içinde hastaneye getirilmelidir
8. Hastaneye getirilirken de serin yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir

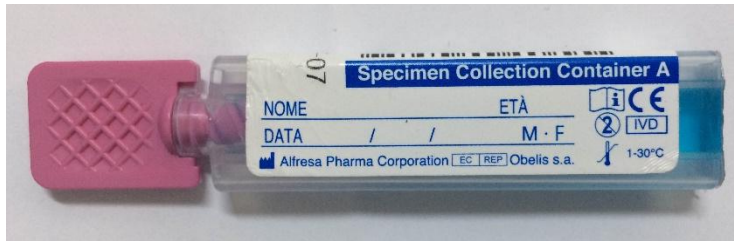

	BUÜ-HASTANESİ BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ İÇİN NUMUNE ALINMASI	Doküman Kodu	EY.FR.10.209.03
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2025
		Revizyon Tarihi	--
		Revizyon No	00
		Sayfa	1/1

1. Kapak çevrilerek açılır
2. Çubuk çıkarılır
3. Çubuğun ucundaki vida gibi çıkıntılı kısım dışkıya batırılır. Eğer dışkı çok katı ise 4-5 defa dışkıya batırılır
4. Çubuk çıkarıldığı yere geri yerleştirilir ve kapağı çevrilerek sıkıca kapatılır
5. Mavi sıvı ile dolu kap iyice çalkalanır
6. Buzdolabının kapağında muhafaza edilir
7. En geç 5 gün içinde hastaneye getirilmelidir
8. Hastaneye getirilirken de serin yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir

